

Twiece RA645

Zweiteilige Frontschutz-Schürze mit bestem Strahlenschutz und optimaler Gewichtsbalance

Als Weiterentwicklung unseres seit Jahrzehnten bewährten Basic-Frontschutzmodells ist die RA645 ab sofort die beste Wahl für Ihren Strahlenschutz im konventionellen Röntgen. Perfekt auf kurze und lange Tragezeiten ausgelegt, bietet sie Ihnen den Schutz, den Sie brauchen, wenn es darauf ankommt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✔ **Perfekte Passform und hoher Komfort:** Die Twiece RA645 gewährt eine ideale Gewichtsverteilung und optimierten Tragekomfort durch die moderne Zweiteilung einer Frontschutz-Schürze.
- ✔ **Ideale Wahl für alle Einsätze:** Besonders geeignet für Situationen, in denen die Schürze auch längere Zeit getragen wird – ohne Kompromisse beim Schutz eingehen zu müssen.
- ✔ **Komfortable Schulterpolster:** Die weichen Schulterpolster, die serienmäßig enthalten sind, sorgen für zusätzlichen Komfort und entlasten Ihre Schultern.
- ✔ **Flexible Verschlussanpassung:** Die zwei Schnappschnallen-Verschlüsse, an Weste und Rock, können leicht in der Länge variiert werden. Genießen Sie den Komfort einer individuellen Passform.
- ✔ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite® Plus
oder Leadfree 2.0



Frontseitig:

0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig:

0,25 mm Pb (Standard)
oder 0,00 mm Pb (optional)



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 91 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 124 - 134 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 135 - 145 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 146 - 156 cm

* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



FRONTSCHUTZ

Wählen Sie unsere Twiece RA645 – für ergonomischen Schutz und höchsten Komfort bei jedem Einsatz!

Leichtigkeit im Design

Zweiteilung – Perfekt alltagstauglich

Hoher Schutz bedeutet oft auch mehr Gewicht. Die Aufteilung der Frontschutz-Schürze RA645 in Weste und Rock ermöglicht die optimale Gewichtsverteilung der Schutzkleidung auf Hüfte und Schultern.

Durch diese durchdachte Konstruktion wird die Last gleichmäßig verteilt und somit die Schultern und der Rücken spürbar entlastet.

Zusätzlich wird durch die bessere Anpassung an die individuelle Körperform ein sicherer und stabilerer Sitz am Körper gewährleistet.

Besonders bei längerem Tragen sorgt diese innovative Lösung dafür, dass der Tragekomfort deutlich erhöht wird und Ermüdungserscheinungen vorgebeugt wird, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.



RFID-Chip inklusive

Anwenderfreundlich


Das durchdachte Design der Frontschutz-Schürze RA645 ermöglicht ein leichtes und schnelles Anziehen oder Ablegen mithilfe langlebiger Schnappschnallen-Verschlüsse hoher Qualität – einer an der Weste, einer am Rock.

Rückenflügel

Beim Modell RA645 kann gewählt werden, ob in den Rückenflügeln weiterhin ein Schutz von 0,25 mm Pb bestehen soll oder für eine Gewichtsreduzierung der Schürze auf diesen verzichtet wird, für noch mehr Tragekomfort.

Schulterpolster

Auch unsere Frontschutzschürzen kommen standardmäßig mit weichen Schulterpolstern, die Ihre Schultern entlasten.

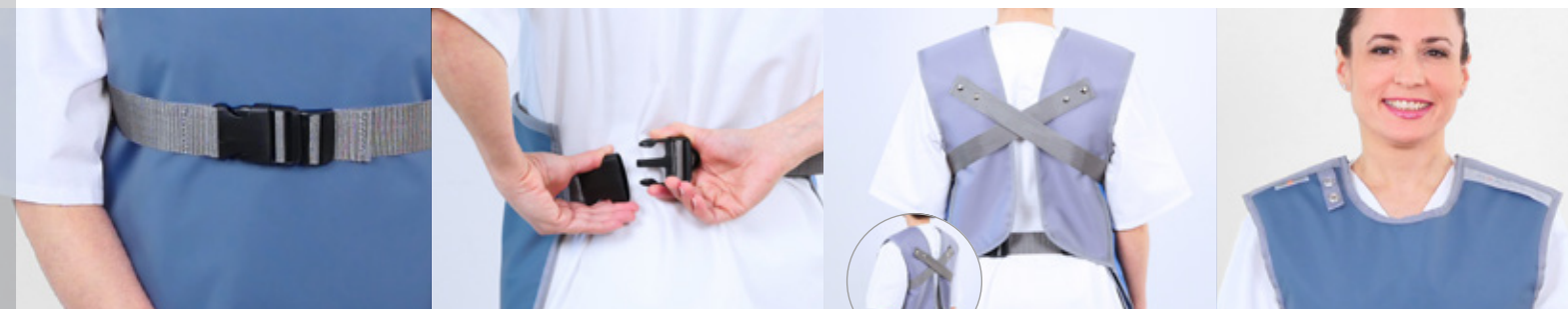

Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Rocklängen / Körpergröße:
65 cm / 150 - 170 cm
70 cm / 170 - 180 cm
75 cm / 180 - 190 cm
80 cm / 190 - 200 cm

Optional



Auf Wunsch:
Ärmel
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz

