

Comfort RA660

Frontschutz-Schürze RA660 – Moderner Schutz für Ihren Arbeitsalltag

Unsere Kunden schätzen die RA660 als ihren Favoriten unter den Frontschutz-Schürzen. Diese Schürze ist speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen Sie nur von vorne Strahlen ausgesetzt sind. Sie lässt sich bequem an- und ausziehen, passt sich gut an den Körper an und bietet eine hervorragende Passform sowie Schulterentlastung.

Warum die RA660 die beste Wahl für Sie ist:

- ✔ **Hervorragender Tragekomfort:** Der breite Stretchteileinsatz, der sich über den gesamten Rücken erstreckt, sorgt für einen guten Sitz der Schürze und eine optimale Passform, insbesondere bei längerem Tragen.
- ✔ **Flexibilität:** Wählen Sie optional die Version ohne Schutz im Rückenbereich, um das Gewicht der Schürze zu reduzieren und noch mehr Komfort zu genießen.
- ✔ **Schulterentlastung:** Die Schürze kommt standardmäßig mit weichen Schulterpolstern, die Ihre Schultern entlasten.
- ✔ **Verschluss-System:** Für maximale Langlebigkeit verwenden wir nur hochwertige Klettverschlüsse, die besonders strapazierfähig sind.
- ✔ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 91 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 124 - 134 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 135 - 145 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 146 - 156 cm

* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



FRONTSCHUTZ

Abb.: ComforTex HPMF Hybrid, Olive

*Entscheiden Sie sich für die RA660 – für modernen Schutz,
hohen Komfort und herausragende Qualität in Ihrem Arbeitsalltag.*

Levio® 
Optimiertes Schutzkonzept

Komfortables Design

Breiter Stretcheinsatz

Dieser Einsatz gewährleistet nicht nur einen sicheren und stabilen Sitz der Schürze, sondern auch eine perfekte Anpassung an die individuellen Körperformen. Diese durchdachte Konstruktion ermöglicht eine optimale Passform, die den Druck gleichmäßig verteilt und somit die Schultern und den Rücken spürbar entlastet.

Besonders bei längerem Tragen sorgt diese innovative Lösung dafür, dass der Tragekomfort deutlich erhöht wird und Ermüdungserscheinungen vorgebeugt wird, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Levio® Edition

Die Schürze RA660 ist auch in unserer Levio-Edition verfügbar. Optimiertes Gewicht-Schutz-Verhältnis: Statt mit einem einheitlichen Bleigleichwert im gesamten Frontbereich schützt Levio - von oberhalb der Brust bis unterhalb der Gonaden - mit einem höheren Bleigleichwert.



RFID-Chip inklusive

Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist optisch durch ein eingenahtes Band getrennt/markiert.

Anwenderfreundlich


Das durchdachte Design der Frontschutz-Schürze RA660 ermöglicht ein leichtes und schnelles Anziehen oder Ablegen.

Besonderes Feature Stretcheileinsatz

Der Stretcheinsatz als ideale Entlastung, vor allem bei langen Tragezeiten. Der über die Breite des gesamten Rücken verlaufende Stretcheileinsatz sorgt für guten Sitz und Schulterentlastung.

Schulterpolster

Auch unsere Frontschutzschürzen kommen standardmäßig mit weichen Schulterpolstern, die Ihre Schultern entlasten.

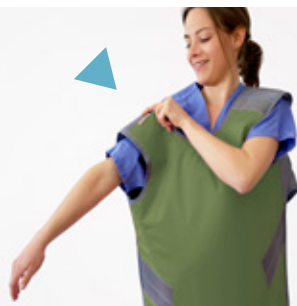

Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Länge / Körpergröße:
90 cm / 150 - 160 cm
100 cm / 160 - 170 cm
110 cm / 170 - 180 cm
120 cm / 175 - 190 cm
130 cm / 185 - 195 cm
140 cm / 195 - 205 cm

Optional



Auf Wunsch:
Ärmel
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz

