


DE



BR126

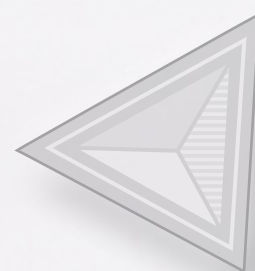

**Röntgenschutz-Brille
inklusive Seitenabschirmung**

MAVIG

Technische Daten und Spezifikationen



„Stardust/Curacao“



„Cocoa/Mandarin“



„Midnight/Regatta“



„Sandstone/Orange“



„Cocoa/Light Blue“



Strahlenschutz-Seitenteile, bleifrei, aus „Trielle“

BR126 Sie ist darauf ausgelegt, die Augen des Anwenders bestmöglich vor Streustrahlung aus allen Einfallswinkeln zu schützen.



- Spezielles Design für einen spaltfreien Schutz vor Streustrahlung
- Strahlenschutz bis zu den Schläfen



- Korrektureinschliffe für Einstärken- und Gleitsichtgläser möglich
- Für beide Größen, small-medium und large, sind Werte für die Sphäre von +4,00 dpt bis -4,00 dpt und ein Zylinder von +2,00 dpt bis -2,00 dpt machbar. (Optische Korrekturen, die außerhalb des Standardbereiches liegen, auf Anfrage.)




- Strahlenschutz-Seitenteile (Bleifrei) aus dem Kunststoff-Compound „Trielle“
- Patentierte Zusammensetzung, Bleigleichwert 0,50 mm Pb
- Normkonform nach IEC 61331-1:2014


Besondere Qualitätsmerkmale optimieren den Einsatz im medizinischen Bereich

- ✓ **Superentspiegelte Gläser für entspanntes und ermüdungsfreies Sehen**
- ✓ **Gleitsichteinschliffe, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen**
(modernes Glasdesign mit Freiformtechnologie für eine deutlich breitere Progressionszone und somit ein stufenloses, scharfes Sehen in allen Entfernungen bei ausgeglichenerm Sehkomfort)
- ✓ **Allergiefreiheit durch hochwertiges Kunststoffmaterial**
- ✓ **Formgebung und Material unterstützen die Vermeidung von Verletzungsrisiken**
- ✓ **Leichte Reinigung und sehr guter Widerstand gegenüber chemischen Einflüssen**
(Desinfektionsmittelbeständigkeit)


Modell	BR126
Farbdesigns	Stardust/Curacao, Cocoa/Mandarin, Midnight/Regatta, Sandstone/Orange, Cocoa/Light Blue
Größen	„small-medium“ und „large“
Bleigleichwert - Frontschutz/Glas (50 - 150 kV)	0,50 mm Pb oder 0,75 mm Pb
Bleigleichwert - Seitenschutz (50 - 150 kV)	0,50 mm Pb
Gewicht (plano)	ca. 80 g (0,50 mm Pb) / ca. 85 g (0,75 mm Pb)
Entspiegelung der Gläser	✓
Brillenband / Brillenetui / Brillenputztuch	✓ / ✓ / ✓
Reinigung / Desinfektion	✓ / ✓
Konformität: IEC 61331-1:2014 / IEC 61331-3:2014	✓ / ✓

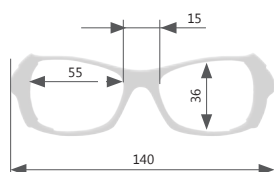

„small-medium“

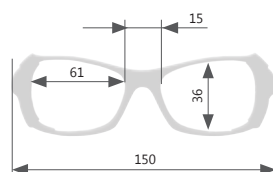

„large“

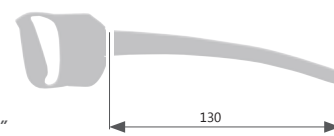

MAVIG GmbH

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

www.mavig.de