

DE



UT30

Universeller Untertisch-Streustrahlenschutz
für OP-Tische

MAVIG

**MAVIG-Unterkörperschutz-Systeme
für OP Tische schließen eine Lücke im
Strahlenschutz.**

**Die Untertischlamellen sind universell
einsetzbar. Die Lamellen sind unter-
einander kombinierbar, so dass alle
Anforderungen optimal umgesetzt
werden können.**

UT30

Für die meisten OP-Tische sind herkömmliche Untertisch-Strahlenschutz-Einrichtungen, wie sie aus dem Bereich der Interventionellen Radiologie, z.B. von Herzkatheter-Arbeitsplätzen bekannt sind, in der Regel nicht einsetzbar.

Insbesondere OP-Tische, deren Segmente kipp- und neigbar sind, erfordern gesonderte Lösungen.

Mit dem UT30 bietet MAVIG seit Jahren ein System an, welches dem Anwender bei so gut wie allen OP-Tisch-Fabrikaten und Modellen einen optimalen Strahlenschutz für den Unterkörper erschafft.

Die Strahlenschutz-Lamellen passen sich an alle Tischbewegungen synchron an. Das medizinische Personal wird wirksam geschützt.

Das MAVIG-System UT30 erlaubt es, Lamellen einzeln an den Tisch einzuhängen. Mit einem einzigen Handgriff sind diese sicher und überlappend zueinander zu fixieren.

Einzeln einzuhängende Lamellen geben Freiraum, alle erdenklichen Erfordernisse für den gesamten Tisch-behang mit wenigen Handgriffen sicher zu erfüllen. Die Überlappung der Lamellen zueinander sorgt für eine geschlossene Schutzzone.

Den Anforderungen der Hygiene wird durch die komplett geschlossenen, verschweißten Lamellen bestens entsprochen. Eine leichte Reinigung und Desinfektion aller Bauteile war uns Pflicht beim Design.

Der Adapter ist universell für Tischprofilschienen in den Abmessungen von 7 x 25 mm bis 10 x 30 mm (BxH) ausgerichtet.

Auf Wunsch fertigen wir jederzeit gerne auch für anderslautende Profilschienenmaße an.




Universell einsetzbares Set, bestehend aus 3 Untertisch-Lamellen zum Einhängen in Flachprofilschienen von 7 x 25 mm bis 10 x 30 mm (B x H) mit einem Bleigleichwert von 0,50 mm Pb gemäß IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016, Röntgenröhren-Spannungsbereich 50 - 150 kV.

Artikel UT3060SET – Lamellenhöhe 600 mm
Artikel UT3075SET – Lamellenhöhe 750 mm
Artikel UT3090SET – Lamellenhöhe 900 mm
Breite aller Lamellen: 290 mm


Zur Ergänzung des Basissets sind weitere Lamellen einzeln erhältlich.

Artikel UT3060SL – Lamellenhöhe 600 mm
Artikel UT3075SL – Lamellenhöhe 750 mm
Artikel UT3090SL – Lamellenhöhe 900 mm
Breite aller Lamellen: 290 mm

Gerne können wir den Untertisch-Schutz auf Anfrage auch passend für Schienenprofile in abweichenden Profilabmessungen anfertigen.

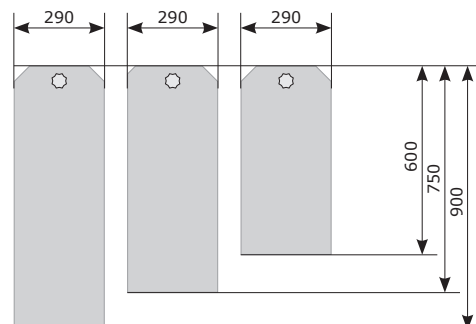

Universeller Untertisch-Streustrahlenschutz für OP-Tische

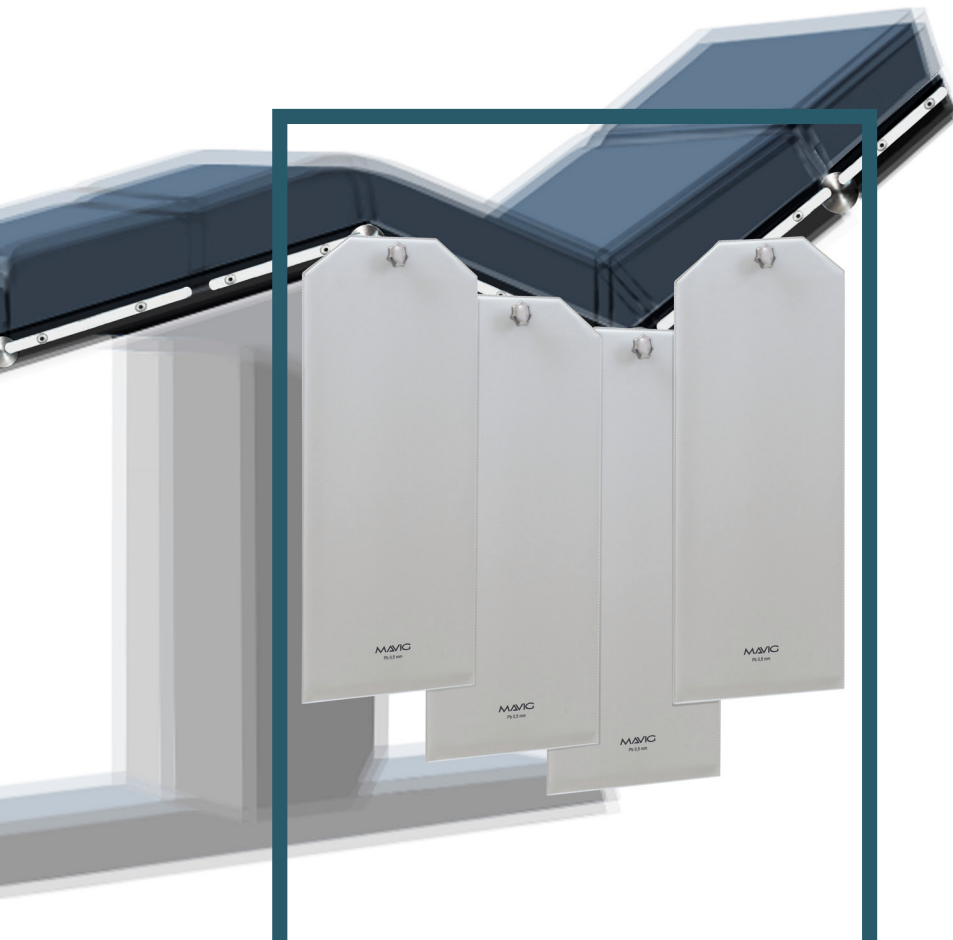

Der UT30-Adapter passt universell für OP-Tisch-Flachprofilschienen von 7 x 25 mm bis 10 x 30 mm (BxH). Die Strahlenschutz-Lamellen sind damit sicher und leicht arretierbar.

Die Konzeption der freischwingenden Lamellenaufnahme sorgt dafür, dass die Schutzeinrichtung alle Tischbewegungen synchron nachvollzieht.





MAVIG GmbH Firmensitz

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

WEITERE MAVIG STANDORTE WELTWEIT

Nordische & baltische Länder MAVIG Nordic

Stockholm
Schweden

Telefon +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail larsson@mavig.com

Benelux, GB, Irland MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516 AW Den Haag
Niederlande

Telefon +31 (0) 70 33 11 688
Mobil +31 (0) 6 1595 43 48
e-Mail simmonds@mavig.nl

Frankreich MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
Frankreich

Telefon +33 (0)1 30 59 46 23
Fax +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail info@mavig.fr

Südost-Europa MAVIG Southeast Europe

Ljubljana
Slowenien

Telefon +386 (40) 6 33 900
e-Mail dejak@mavig.com

AUSLANDSVERTRETUNGEN

USA & Kanada

Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Telefon +1 (585) 247 1212
Fax +1 (585) 247 1395
e-Mail mavigusteam@mavig.com

Naher Osten & Nordafrika

Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Libanon

Telefon +961 14 23 499
Fax +961 14 26 499
e-Mail mavig@mena-md.com

Russische Föderation

AO Sante Medical Systems

Novodmitrovskaya 2, bld.1
127015 Moscow
Russia

Telefon +7 499 551 55 73/75
e-Mail info@sante.ru

www.mavig.de