


DE

UT70

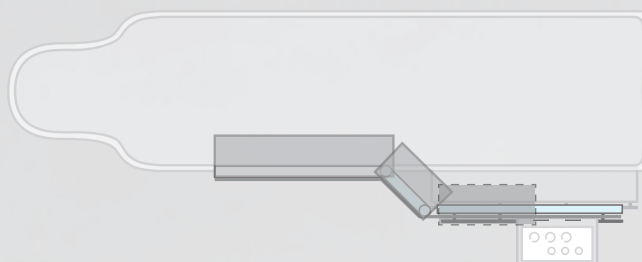

Ein modularer Unterkörperschutz
für multiple Anwendungen

MAVIG

UT70

Der tischmontierte Unterkörperschutz UT70 bietet höchste Flexibilität bei maximalem Schutz.

Der modulare Aufbau macht es dem Anwender möglich, den Untertisch-Streustrahlenschutz je nach Bedarf rechts- bzw. linksseitig am Tisch zu verwenden, anzupassen oder auch zu erweitern.

Von dem großflächigen Untertisch-Streustrahlenschutz profitiert nicht nur der Anwender, sondern auch die Assistenz. Eine am Unterkörperschutz montierte Zubehörschiene bietet außerdem den notwendigen Platz für Tisch- und bspw. C-Arm-Kontrolleinheiten, sowie für weiteres Equipment

- ✓ Untertisch-Streustrahlenschutz mit einem Bleigleichwert von 0,50 mm Pb für alle Komponenten/Lamellen
- ✓ Hauptteil (MS) kann individuell mit Seitenlamellen und Aufsätzen kombiniert werden, bis zu 1620 mm Gesamtbreite
- ✓ Erhältlich für folgende Tischiinnen-Profile: 7,7 x 25 mm (GE), 9 x 25 mm (Toshiba/Canon) und 10 x 25 mm (Philips/Siemens)
-> Achten Sie auf eine Minimallänge der Tischiinne von 600 mm für die korrekte Befestigung des UT70.
- ✓ Zusätzliche, frontseitige Zubehörschiene am Hauptteil, passend zum Profil der Tischiinne
- ✓ Optional: Wandaufhängung für die schonende Aufbewahrung


Die **Außenhüllen** der flexiblen Strahlenschutzlamellen werden aus dem recycelbaren Werkstoff **TPU** (Thermoplastisches Polyurethan) gefertigt. Dieser ist enorm zug- und reißfest, phthalatfrei und mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gut desinfizierbar. Die Materialverträglichkeit mit dem Strahlenschutzmaterial wurde in Klimakammer-Tests nachgewiesen. Zudem garantiert das TPU-Material durch ein neues, **patentiertes Fertigungsverfahren** (Hochfrequenzschweißen) eine enorm **lange Lebensdauer**.

Das Hauptteil des UT70 kann mittels eines Drehknopfes an der Tischiinne fixiert werden.

Die Halteklammern der abnehmbaren Oberteile sind verstärkt und vergrößert, sowie deren Befestigung optimiert.

UT70 Komponenten


Der modulare UT70 besteht aus folgenden Komponenten. Diese können individuell kombiniert werden. Wir beraten Sie gerne.

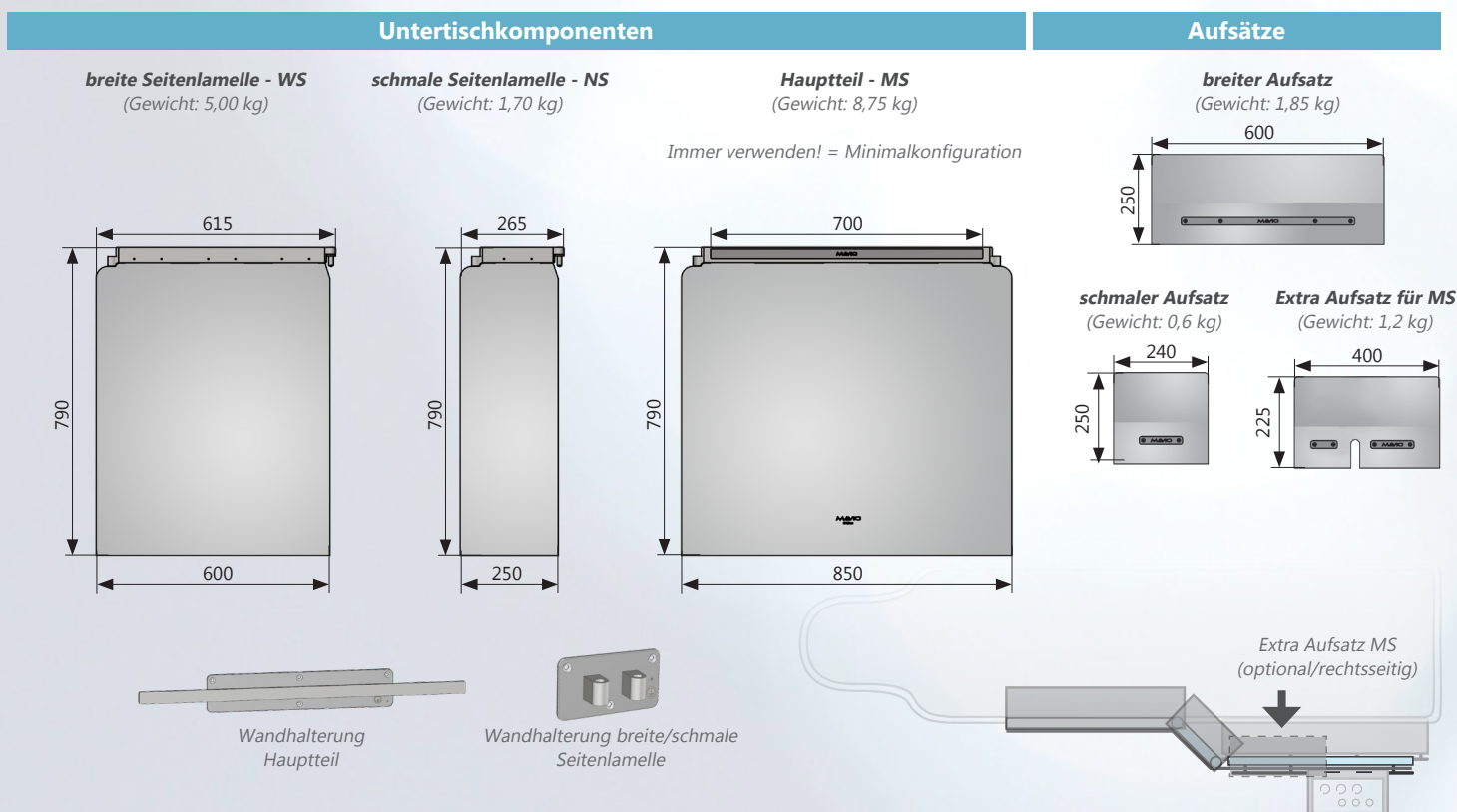

Standard-/Beispielkonfigurationen

UT70 (Standard: empfohlene Mindestschutzfläche)


- Gesamtbreite: bis zu 1410 mm
- Zwei sich überlappende, flexible Strahlenschutzlamellen (Hauptteil + breite Seitenlamelle)
- Ein passender abnehmbarer Aufsatz (breit)

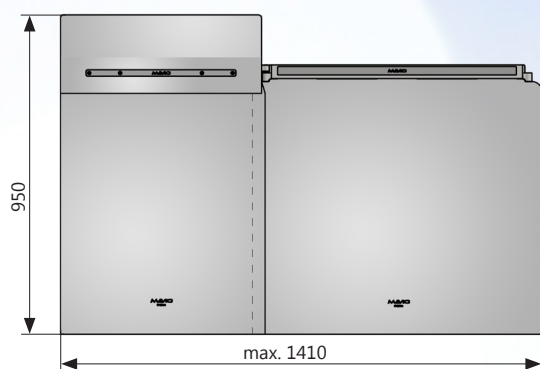

Artikel-Nr.: UT70-77WS mit 7,7 mm Zubehorschiene
 UT70-90WS mit 9 mm Zubehorschiene
 UT70-10WS mit 10 mm Zubehorschiene

UT70 (Maximal mögliche Schutzfläche)

- Gesamtbreite: bis zu 1620 mm
- Drei sich überlappende, flexible Strahlenschutzlamellen (Hauptteil + schmale & breite Seitenlamelle)
- Zwei passende abnehmbare Aufsätze (schmal & breit)

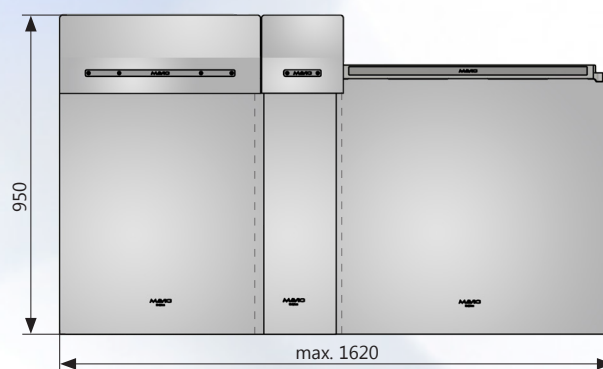

Artikel-Nr.: UT70-77NSWS mit 7,7 mm Zubehorschiene
 UT70-90NSWS mit 9 mm Zubehorschiene
 UT70-10NSWS mit 10 mm Zubehorschiene

UT70-77

UT70-77NS

UT70-77NSNS

UT70-77NSWS

UT70-77WS

Artikelnummer	Beschreibung	Komponenten* (je 1x)
UT70-77NSWS	Unterkörperschutz UT70 mit 7,7 mm Zubehorschiene, Maximalbreite	MS, NS, WS
UT70-90NSWS	Unterkörperschutz UT70 mit 9 mm Zubehorschiene, Maximalbreite	MS, NS, WS
UT70-10NSWS	Unterkörperschutz UT70 mit 10 mm Zubehorschiene, Maximalbreite	MS, NS, WS
UT70-77	Unterkörperschutz UT70, nur Hauptteil mit 7,7 mm Zubehorschiene	MS
UT70-90	Unterkörperschutz UT70, nur Hauptteil mit 9 mm Zubehorschiene	MS
UT70-10	Unterkörperschutz UT70, nur Hauptteil mit 10 mm Zubehorschiene	MS
UT70-77NS	Unterkörperschutz UT70, 2-teilig, mit 7,7 mm Zubehorschiene	MS, NS
UT70-90NS	Unterkörperschutz UT70, 2-teilig, mit 9 mm Zubehorschiene	MS, NS
UT70-10NS	Unterkörperschutz UT70, 2-teilig, mit 10 mm Zubehorschiene	MS, NS
UT70-77NSNS	Unterkörperschutz UT70, 3-teilig, mit 7,7 mm Zubehorschiene	MS, NS, NS
UT70-90NSNS	Unterkörperschutz UT70, 3-teilig, mit 9 mm Zubehorschiene	MS, NS, NS
UT70-10NSNS	Unterkörperschutz UT70, 3-teilig, mit 10 mm Zubehorschiene	MS, NS, NS
UT70-77WS	Unterkörperschutz UT70, 2-teilig, mit 7,7 mm Zubehorschiene	MS, WS
UT70-90WS	Unterkörperschutz UT70, 2-teilig, mit 9 mm Zubehorschiene	MS, WS
UT70-10WS	Unterkörperschutz UT70, 2-teilig, mit 10 mm Zubehorschiene	MS, WS
E-UT70U030	Breiter Aufsatz, einzeln	(WS)
E-UT70U050	Schmaler Aufsatz, einzeln	(NS)
E-UT70U080	Extra Aufsatz für Hauptteil - nur rechtsseitig, einzeln	(MS)
E-UT70W010	Wandhalterung für Hauptteil	(MS)
E-UT70W020	Wandhalterung für breite und schmale Seitenlamelle(n)	(NS, WS)

* Die Seitenlamellen-Komponenten sind immer mit passendem Aufsatz.



MAVIG GmbH Firmensitz

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

WEITERE MAVIG STANDORTE WELTWEIT

Nordische & baltische Länder MAVIG Nordic

Stockholm
Schweden

Telefon +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail larsson@mavig.com

Benelux, GB, Irland MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516 AW Den Haag
Niederlande

Telefon +31 (0) 70 33 11 688
Mobil +31 (0) 6 1595 43 48
e-Mail simmonds@mavig.nl

Frankreich MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
Frankreich

Telefon +33 (0)1 30 59 46 23
Fax +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail info@mavig.fr

Südost-Europa MAVIG Southeast Europe

Ljubljana
Slowenien

Telefon +386 (40) 6 33 900
e-Mail dejak@mavig.com

AUSLANDSVERTRETUNGEN

USA & Kanada

Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Telefon +1 (585) 247 1212
Fax +1 (585) 247 1395
e-Mail mavigusteam@mavig.com

Naher Osten & Nordafrika

Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Libanon

Telefon +961 14 23 499
Fax +961 14 26 499
e-Mail mavig@mena-md.com

Russische Föderation

AO Sante Medical Systems

Novodmitrovskaya 2, bld.1
127015 Moscow
Russia

Telefon +7 499 551 55 73/75
e-Mail info@sante.ru

www.mavig.de